

レベルフリー


LEVEL FREE

×

アクリ

ACRI

〉 for Cardiovascular

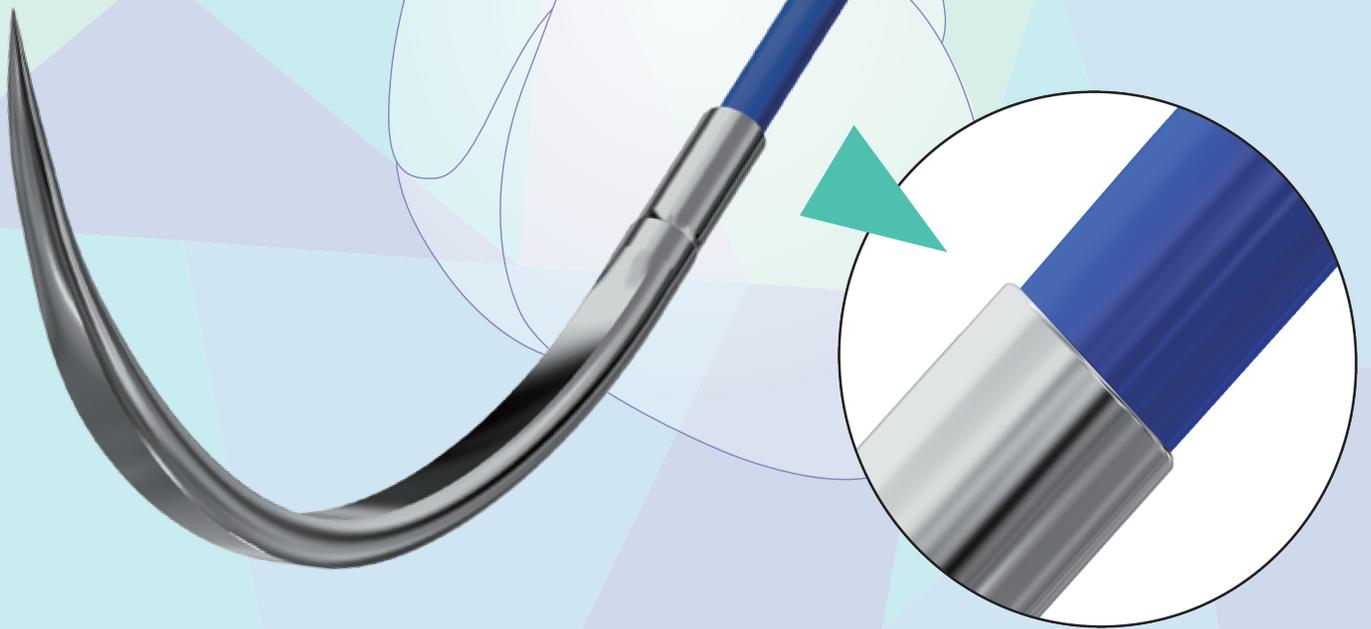

止血に優れた LEVEL FREE

×

切れ味と強度を兼ねそなえた血管用針 ACRI



LEVEL FREEは先天性心疾患手術における肺動脈などの血管吻合時、針糸の段差による血液漏れを軽減します。鋭利で強靱なACRIはスムーズな運針をサポートし、連続縫合時の術者のストレスを軽減します。

LEVEL FREE

レベルフリー

糸の太みに近い針を結合し、針と糸の段差が小さいフラットなカシメ部を実現。血液漏れを軽減します。

液体漏れ検証データ

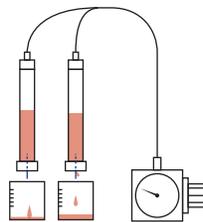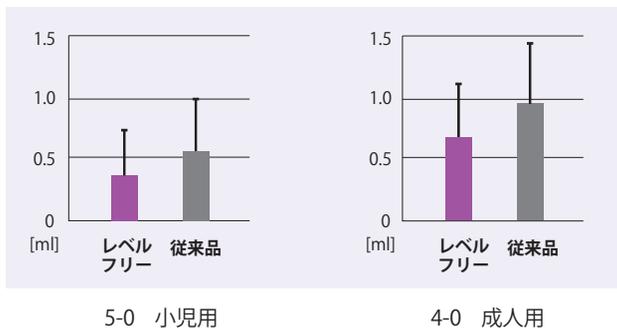

漏れ実験方法

樹脂シート(厚さ0.3mm)に針を貫通させ、糸を通した状態のものを用意。上記シートで液体の入った試験管に蓋をして一定圧力をかけ、一定時間あたりに漏れた液量を測定。


ACRI

アクリ

高強度素材により針の強度を高めることに成功。鋭利で強靱なACRIは硬い組織に対しても高い耐久性でスムーズな運針をサポートします。



刺通抵抗値比較

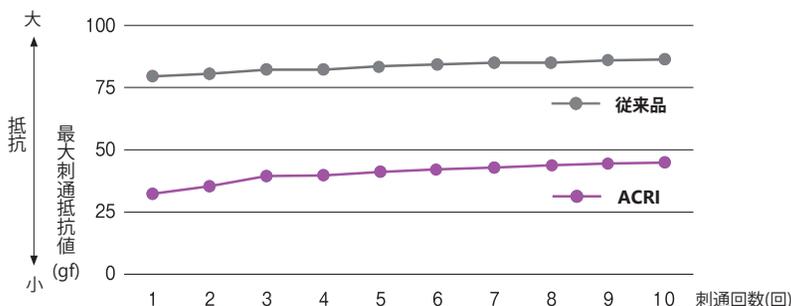

刺通抵抗値

約51%軽減

※10回平均

ASFLEX

アスフレックス

ポリビニリデンフルオライド 合成非吸収性縫合糸

型番	針サイズ	針形状	針弯曲	糸太	糸長	色	入数	用途
APGLF586C2	PGLF-9mm 両端	丸針	弱弯	6-0	75 cm	青	1本×30袋	VSD・ASD・PA
APGLF655C2				5-0	75 cm	青	1本×30袋	VSD・ASD・PA
ARGLF606C2	RGLF-9mm 両端	丸針	強弯	6-0	60 cm	青	1本×30袋	VSD・ASD・PA
ARGLF915C2				5-0	90 cm	青	1本×30袋	VSD・ASD・PA
APGLF526C2	PGLF-11mm 両端	丸針	弱弯	6-0	75 cm	青	1本×30袋	VSD・ASD・PA
APGLF535C2	PGLF-13mm 両端	丸針	弱弯	5-0	90 cm	青	1本×30袋	VSD・ASD・PA

承認番号：21300 BZZ 00389000 / 販売名：PVDF 縫合糸-K

C047-01 製造販売元 株式会社 河野製作所



<https://www.konoseisakusho.jp>

お問合せ先 株式会社 クラウンジュン・コウノ

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2

TEL 03-5577-7015 FAX 03-5577-7019

河野製作所

検索



お問い合わせフォーム